

# Ю-ФІКС

пластыри медицинские

## РАЗНЫЕ ОСНОВЫ – НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ



# Ю-ФІКС



## Пластырь медицинский хирургический с абсорбирующей подушкой

**Размер:** 6 см x 10 см  
10 см x 10 см  
10 см x 20 см

**Основа:** полимерная.

**Категория:** стерильный.

- Предназначен для асептической защиты раны.
- Легко фиксируется в неудобных местах, таких как суставы, стопы, пальцы и колени, и на изгибах тела.
- Подушка имеет высокую степень гигроскопичности, не прилипает к ране, не оставляет в ране волокон.
- Прозрачная полимерная основа (влагостойкая) обеспечивает свободный воздухообмен, позволяет наблюдать за состоянием кожи вокруг раны.




1 Раскрыть упаковку и вынуть пластырь.



2 Снять защитную бумагу.



3 Приложить пластырь абсорбирующей подушкой к ране.

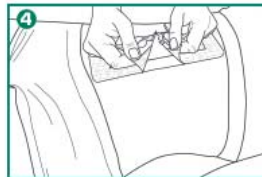

4 Снять защитную пленку.

# Пластыри медицинские стерильные



## Пластырь медицинский хирургический с абсорбирующей подушкой

**Размер:** 6 см x 10 см  
10 см x 10 см  
10 см x 20 см

**Основа:** спанлейс (нетканый материал).

**Категория:** стерильный.

- Предназначен для асептической защиты раны.
- Легко фиксируется в неудобных местах, таких как суставы, стопы, пальцы и колени, и на изгибах тела.
- Подушка имеет высокую степень гигроскопичности, не прилипает к ране, не оставляет в ране волокон.
- Пористая структура пластыря обеспечивает свободный воздухообмен.



1 Раскрыть упаковку и вынуть пластырь.



2 Снять защитную бумагу.



3 Приложить пластырь абсорбирующей подушкой к ране.



4 Прижать пластырь плотно к ноге.



## Для фиксации катетеров

**Размер:** 7 см x 8,5 см.

**Основа:** спанлейс (нетканый материал) / полиуретан (прозрачная «дышащая» пленка).

**Категория:** стерильный.

- Простой в применении благодаря удобному размеру, форме и наличию U-образного выреза.
- Надежно стабилизирует катетер.
- Прозрачная (полимерная) часть основы позволяет контролировать место введения катетера, не снимая повязки.
- Имеет наклейку, которая позволяет записывать дату и время смены повязки и установления канюли.
- Имеет две дополнительные полоски для фиксации трубки инфузионной системы.



## Для фиксации катетеров

**Размер:** 6 см x 8 см.

**Основа:** спанлейс (нетканый материал)

**Категория:** стерильный.

- Простой в применении благодаря удобному размеру, форме и наличию U-образного выреза.
- Надежно стабилизирует катетер.
- Пористая структура пластыря обеспечивает свободный воздухообмен.





# Пластыри медицинские стерильные



## Пластырь медицинский раневой

**Размер:** 7,2 см x 2,5 см.

**Основа:** тканевая/нетканая/полимерная

**Категория:** стерильный.

- Надежно фиксируется, удаляется без боли.
- Все основы прекрасно пропускают воздух и влагу, не вызывая мацерации кожи.
- Можно фиксировать непосредственно на поврежденной поверхности кожи, в том числе на подвижных частях тела, в местах сгибания.
- Подходит для использования у пациентов как с нормальной, так и с чувствительной кожей.



# Ю-ФІКС



## На нетканой основе

**Размер:** 1.25 см x 500 см  
1.25 см x 1000 см  
2.5 см x 500 см  
2.5 см x 1000 см  
5 см x 1000 см  
10 см x 1000 см

**Основа:** из вискозы, микропористая, воздухо- и влагопроницаемая.

**Категория:** нестерильный.

Может применяться у лиц с чувствительной кожей, снимается без боли.

- Закрепление повязок и покрытий, включая лицо и область глаз
- Фиксация инфузионных систем, калоприемников
- Неотложная помощь при мелких повреждениях
- Защита места укола после инъекции

## На тканевой основе

**Размер:** 1.25 см x 500 см  
2.5 см x 500 см

**Основа:** из обработанного хлопка, воздухо- и влагопроницаемая.

**Категория:** нестерильный.

Клеевой слой – оксид цинка и натуральная каучуковая смола. Универсальный пластырь с сильной фиксацией, снимается без боли.

- Закрепление компрессов, тампонов, зондов, катетеров, трубок и т. д.
- Фиксация пальцев и суставов при повреждениях
- Первая помощь при мелких ранах

# Пластыри медицинские нестерильные



## На шелковой основе

**Размер:** 1.25 см x 500 см  
2.5 см x 500 см

**Основа:** шелковая, позволяющая коже «дышать», не вызывающая раздражения.

**Категория:** нестерильный.

Зубчатый край облегчает отрывание. Может применяться у лиц с чувствительной кожей. Особо сильная фиксация. Не липнет к перчаткам, легко снимается.

- Закрепление компрессов, повязок и покрытий
- Фиксация игл, катетеров, канюль, трубок, дренажей и т. д.
- Фиксация пальцев и суставов при повреждениях



## На полимерной основе

**Размер:** 1.25 см x 500 см  
2.5 см x 500 см

**Основа:** полимерная, позволяющая коже «дышать».

**Категория:** нестерильный.

Перфорация – отрывание и в продольном, и в поперечном направлении

Не липнет к перчаткам, снимается без боли.

- Фиксация объемных повязок, в том числе на чувствительной коже, глазах
- Закрепление систем для инфузии, катетеров, зондов, трубок и т. д.



Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.  
Медицинские изделия. Пластыри Ю-ФІКС. Декларация соответствия № 02-2016 от 06.06.2016.  
Пластырь медицинский хирургический Ю-ФІКС, пластырь медицинский для фиксации катетеров Ю-ФІКС,  
пластырь медицинский раневой Ю-ФІКС Сертификат соответствия № PR.119-17 от 13.01.2017

ООО «Юрія-фарм», 03038, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10, Украина

Тел./факс: +38 (044) 275-01-08,  
e-mail: uf@uf.ua

